




NEXTORCH

ENGLISH

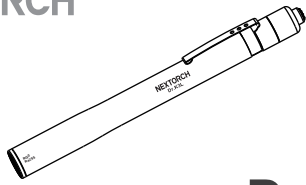

Learn more on  
www.nextorch.com

Dr.K3L

SPECIFICATIONS

Bulb	Dual-light sources (Yellow + White)		
Ra	≥95		
Photobiological safety	RG0 (Yellow)		
CCT	3000K (Yellow)	5500K (White)	
Modes	Low	Medium	High
Light Output	2 lm	10 lm	75 lm
Run Time	42 h	15 h	1 h 30 min
Beam Distance	7 m	15 m	40 m
Battery	2 × AAA Batteries		
Impact Resistant	1 m		
Weight and Dimensions	Weight: 27.8 g (Without battery); Size: 149.8 mm (Length) × 14.3 mm (Head Diameter) × 13.3 mm (Tail Diameter)		
Material	Aluminum Alloy 6061-T6, Type II Anodized		
Accessories	2 × AAA Batteries		

Above data were tested with 2 × AAA batteries at 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using different batteries or testing in a different environment.

FEATURES

- Yellow and white dual-light sources, low- medium-high three light modes to meet various needs.
- Blue light hazard class, RG0 (Risk Exempt).
- High color rendering, Ra ≥ 95, uniform light spot design for better observation.


INSTRUCTIONS

Battery Installation




ON / OFF

Momentary on / off: half press for momentary on and loosen to turn off.

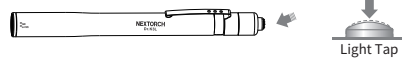


Constant on / off: click for constant on and repeat to turn off.

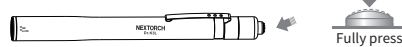

Mode Switch

Three modes: Low (Yellow) - Medium (White) - High (White)

1. In the OFF state, half press to preview modes, continuously tap to switch modes and fully press to lock the mode;
2. Click the button to switch modes in sequence.

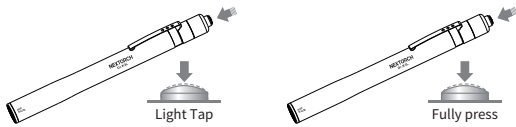

Smart Memory Function

Turn off the penlight for more than 2s, turn it on again, it will enter the last working brightness mode it has memorized.

MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.  
Email us info@nextorch.com  
Call us: 0086-662-6602777  
Or contact local dealer




CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

中文

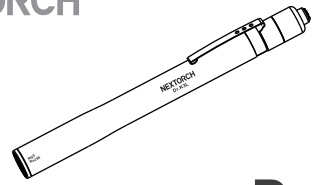

请登录: www.nextorch.com  
获取更多产品资讯

Dr.K3L

产品参数

光源	双光源 (黄光+白光)		
显色指数 (Ra)	≥95		
光生物危害	RG0 (黄光)		
色温 (CCT)	3000K (黄光)	5500K(白光)	
模式	低亮	中亮	高亮
亮度	2 流明	10 流明	75 流明
续航时间	42小时	15小时	1小时30分钟
照射距离	7米	15米	40米
电源	2节AAA电池		
防跌落高度	1米		
规格	重量: 27.8克 (不含电池); 尺寸: 149.8毫米 (长) × 14.3毫米 (头部直径) × 13.3毫米 (尾部直径)		
材料	筒身: 航天铝材6061-T6, 表面II型阳极氧化处理		
配件	2节AAA电池		

上述参数测试, 电池为2节AAA电池, 测试温度为22°C ± 3°C, 测试电池或环境不同, 性能参数可能会有差异。

产品特点

- 黄白双光源设计, 低中高三档亮度, 满足全科检查需求。
- 蓝光危害豁免级, RG0。
- 高显色性, Ra≥95, 均匀光斑设计, 提高观诊效果。


操作说明

电池安装




打开/关闭

方式一: 轻按瞬时点亮, 松手即灭。

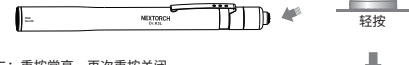


方式二: 重按常亮, 再次重按关闭。

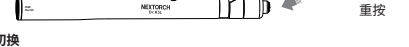

模式切换

1、Dr.K3L具有三档模式: 低亮 (黄光) - 中亮 (白光) - 高亮 (白光)。

- 方式一: 关闭状态下, 轻按可预览亮度模式, 连续轻按可切换亮度模式, 重按锁定该亮度模式。
- 方式二: 2秒内连续重按可切换亮度模式。

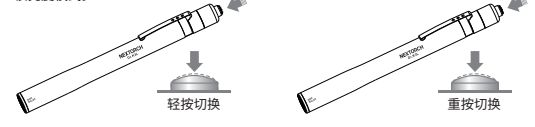

- 2、智能记忆模式: 手电会自动记忆最后的工作亮度模式。关闭手电2秒后, 在下次打开时, 默认打开最后的工作亮度模式。

保养注意事项

1. 当沾到海水或腐蚀物品时, 请及时用清水清洗。
2. 请使用优质电池, 并且在长时间不使用时, 请将电池取出, 放在阴凉处保存。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损, 请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天保换: NEXTORCH产品自售出日起15天内, 在正常使用的情况下, 若出现质量问题, 可免费更换同型号产品; 若该产品已停止生产, 则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品;
2. 5年免费保修期: NEXTORCH产品自售出日起5年内, 在正常使用的情况下, 若出现质量问题, 享受免费维修服务;
3. 充电电池类产品保修期为1年, 产品附加配件不在保修范围内;
4. 终身有限保修: 因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品, 我司将提供有偿保修, 费用以实际更换材料费用为准, 不另收取人工费用;
5. 我可提供多种渠道进行维修服务, 您可通过扫描下方二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务;



与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品, 您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师, 请扫描下方二维码, 联系我们的产品设计师。



成品尺寸: 80mm × 40mm  
 展开尺寸: 280mm × 80mm  
 检验标准: 尺寸 ± 1mm  
 材质: 80克双胶纸  
 颜色: K  
 要求: 双面印刷, 虚线折痕, 按标注正面。